

ダブルウェーブマットレス 取扱説明書 MB-2250,2251,2500,2501

マットレスを正しくお使いいただくためにシーホネンスからのお願い

このたびは、ダブルウェーブマットレスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書にはご使用上の注意事項や操作方法が記載されています。
- ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになって、正しくお使い下さい。
- ダブルウェーブマットレスを使用される方ばかりでなく、付き添いの方にもこの取扱説明書の内容を説明してください。
- お読みになった後も、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
- ご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店にお問合せください。

仕 様

商品番号	MB-2250	MB-2251	MB-2500	MB-2501
クッション材	ポリエステル 100%			
カバー	ポリエステル 100%	ポリエステル 100% 抗菌加工	ポリエステル 100%	ポリエステル 100% 抗菌加工
寸法 (mm)	種類 幅×長さ×厚み	種類 幅×長さ×厚み	種類 幅×長さ×厚み	種類 幅×長さ×厚み
	ショート 900×1830×55	ショート 900×1830×55	S2 730×1910×80	S 730×1910×80
	レギュラー 900×1930×55	レギュラー 900×1930×55	S 780×1910×80	S2 780×1910×80
	ロング 900×2080×55	ロング 900×2080×55	M 830×1910×80	M 830×1910×80
	L2レギュラー 1000×1930×55	L2レギュラー 1000×1930×55	ショート 900×1810×80	ショート 900×1810×80
	L2ロング 1000×2080×55	L2ロング 1000×2080×55	レギュラー 900×1910×80	レギュラー 900×1910×80
			ロング 900×2050×80	ロング 900×2050×80
			L2レギュラー 1000×1910×80	L2レギュラー 1000×1910×80
			L2ロング 1000×2050×80	L2ロング 1000×2050×80

安全にお使いいただくために

説明書の内容を無視し、誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を下の表示(絵表示と用語)で区分し、説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が命にかかわるけがを負う可能性が想定される内容を示しています。



注意


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人がけがを負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。



警告

この表示の説明は、危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ人が生命にかかわるけがを負う可能性が想定されます。

- 体の挟み込みに注意してください。
頭や腕、足をはさんで大変危険です。
ベッドの操作時には、ベッドとサイドレールや介助バーの隙間に頭や腕、足を挟まれないようにしてください。

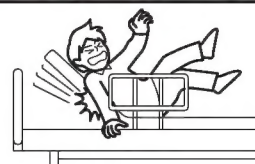

シーホネンス株式会社

安全にお使いいただくために

⚠ 注意 以下の項目は、全て危険行為ですので必ず守って下さい。守らなければ人がケガを負う可能性や物品的損害の発生が想定されます。


- 弊社の通気性の良いメッシュボトムのベッドを使用してください。
このマットレスには、必ず弊社の通気性の良いメッシュボトムのベッドを組み合わせしてお使いください。他社製ベッドは、寸法が適合しただけでなくマットレスの通気性能が発揮できずマットレス本来の性能が活かせません。
- マットレスの上に敷き布団などを置かないでください。
ベッドとマットレスの性能を活かすためマットレスの上に敷き布団などを置かないでください。特に、背中や足が動くギャッチベッドでは、動作の際に体がずれて窮屈な状態になり大変危険です。
- 汚物などで汚れた場合は、速やかに洗浄してください。
汚物などで汚れると衛生面によくないだけでなく、クッション材の弾性に影響を与えますので出来る限り速やかに洗浄してください。
- カバーの洗濯などの取扱いは、タグ表示を参照して行ってください。
- 現在医師などに指示を受けて治療されている方は、マットレスを使用する前に掛かりつけの医師などにご相談ください。

洗浄・乾燥について

● 当社が推奨する洗浄と乾燥

ダブルウェーブマットレスを水洗いをする場合は、天日干しを避けて乾燥を行ってください。

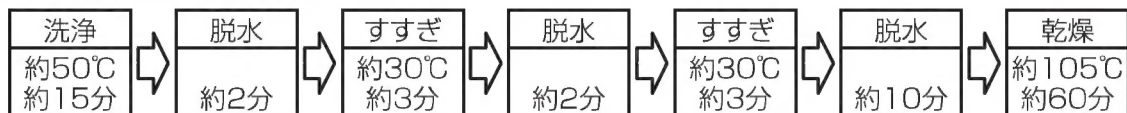


マットレス専用の洗浄・乾燥機を使用する場合は、下記の条件を参考にして行ってください。
(下記条件はあくまでも目安です。洗浄乾燥機の設定条件が異なる場合は、下記カスタマーサポートまでお問い合わせください)



洗浄・乾燥温度は105℃以下にしてください。

● カバーの洗濯表示の説明について

表示タグの説明 (カバーの洗濯は、カバー内側の表示タグを参照して行ってください)

 <p>洗濯機の弱水流又は手洗い、水温は40℃を限界とし、中性洗剤を使用してください。</p>	 <p>塩素系漂白剤による漂白はできません。</p>	 <p>アイロンは120℃(低温)を限界とし、下に当て布を使用してください。</p>
--	---	---

⚠ 注意 洗濯する際は、チャックを最後まで閉めてください。チャックが破損します。

保管について

- マットレスの上に重たいものやマットレスを何枚も重ねて長時間保管しないでください。
- マットレス専用の洗浄・乾燥機で乾燥した場合、熱が十分さめてから水平に保管してください。高温の状態で保管する場合は立てて保管してください。
- 高温多湿のところや、直射日光が当たるところでの保管はしないでください。

商品に関する
お問い合わせ

シーホネンス・
カスタマーサポート



0120-20-1001

受付時間 / 月曜～金曜 9:00～17:30
(土・日・祝日、夏期休暇、年末年始を除く)

シーホネンス株式会社

大阪本社
〒537-0001 大阪市東成区深江北3-10-17
TEL 06-6981-3432 FAX 06-6981-3460

修理・お取り扱いお手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店、
レンタル取次店へお申し付けください。

【カスタマーサポートお問い合わせ窓口】

無 料 ツーワ

FreeCall

0120-20-1001

10月1日は福祉用具の日



シーホネンス株式会社

〒537-0001 大阪市東成区深江北3丁目10番17号 TEL (06) 6981-3432

© 2005 SEAHONENCE INC. (シーホネンス株式会社) All Rights Reserved.